


Pferde, Rinder, Kamele, Großtiere

Digitale Video-Bronchoskopie
zur Untersuchung der Atemwege

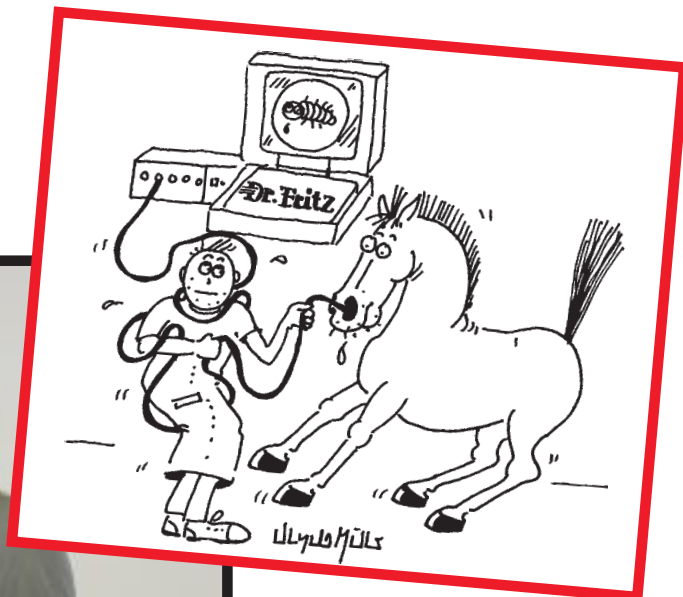

**Bronchoskopie und Laryngoskopie
für Pferde in der Außenpraxis
– die neue ETL Generation –**

Bronchoskopie beim Pferd für die Außenpraxis



Bei den neuen Bronchoskop-Generationen sind wesentliche Nachteile der bisherigen Humangeräte vollständig beseitigt. Die Bildqualität entspricht dem neuen Klinik-Videostandard. Die Anwendbarkeit vor Ort wurde optimiert durch das neue Pocket-Format. Die Reinigung und Desinfektion ist durch den verschließbaren Arbeitskanal vereinfacht und ermöglicht Reihenuntersuchungen, die Robustheit der Geräte wurde durch die Neukonzeption insgesamt wesentlich optimiert. Eine einfache, digitale Aufzeichnung ist jederzeit möglich, genauso wie eine Nutzung als Center-Einheit für alle Videoanwendungen in der Praxis und Klinik. Auch einsetzbar für die Bereiche Gynäkologie und Urologie.

- verschließbarer Arbeitskanal – ideal für Reihenuntersuchungen
- Pocket-Format von Lichtquelle, Prozessor und Monitor
- superschlank
- spüldüsenfrei
- für den mobilen und stationären Einsatz

Bronchoskop



Prozessoreinheit mit Lichtquelle



- für alle Applikationen z.B. Broncho-, Arthro- u. Laparoskopie, Zahnendoskopie, Gastroskopie

Die digitalen Center-Einheiten für die Pferdepraxis und Klinik

FVL-95-H Pferdebronchoskop, Standard SET H zur mobilen und digitalen Bronchoskopie, bestehend aus:

FVL-95-201 Video-Broncho-Laryngoskop, 210cm, 9mm, super schlanke ETL-Generation, p. z. Pocketprozessoren, Arbeitskanal: 2,8mm, verschließbar, - ideal für Reihenuntersuchungen - ablenkbar: 90/70° und 80/80° ohne Prozessor, einschl. Dichtetester Verschlusssonde (FVL-95A-230) Reinigungsbürste (F28-2208) im Transportkoffer

FVL-95P-1H Digitale Video Station, P1 "Standard" im Pocket-Format, mit Xenophot 150 Licht, integrierter 5" LCD Monitor, Ausgänge: Video composite Netzteil, 12VDC, 115-230 VAC (FVL-95NTD) Gesamtgewicht: 3kg, einschl. Transporttasche

FVL-95-U Pferdebronchoskop, Standard SET U, mit hochauflösendem, digitalem USB-Videorekorder (MPEG2) mit USB-Stick bestehend aus:

FVL-95-201 Video-Broncho-Laryngoskop, 210cm, 9mm,

FVL-95P-1U Digitale Video Station, P1 "USB" im Pocket-Format, mit Xenophot 150 Licht, USB-Speichersystem, hochauflösender integrierter 5" LCD Monitor, Ausgänge: Video composite Netzteil, 12VDC, 115-230 VAC (FVL-95NTD) Gesamtgewicht: 3,1kg, einschl. Transporttasche

Zubehör:


H150-5-E Ersatzbirne für FVL-95P-1

PC-95-PSK USB-Kit mit Treiber-Software und Kabelverbindung Chinch/Y/C-USB

T520-1593 Kamerakopf für T520 u. FVL Prozessoren, zur Arthro-/Laparoskopie, 22 mm, einlegbar

Übersicht: Digitale Center-Einheit

Bildaufnahme über:

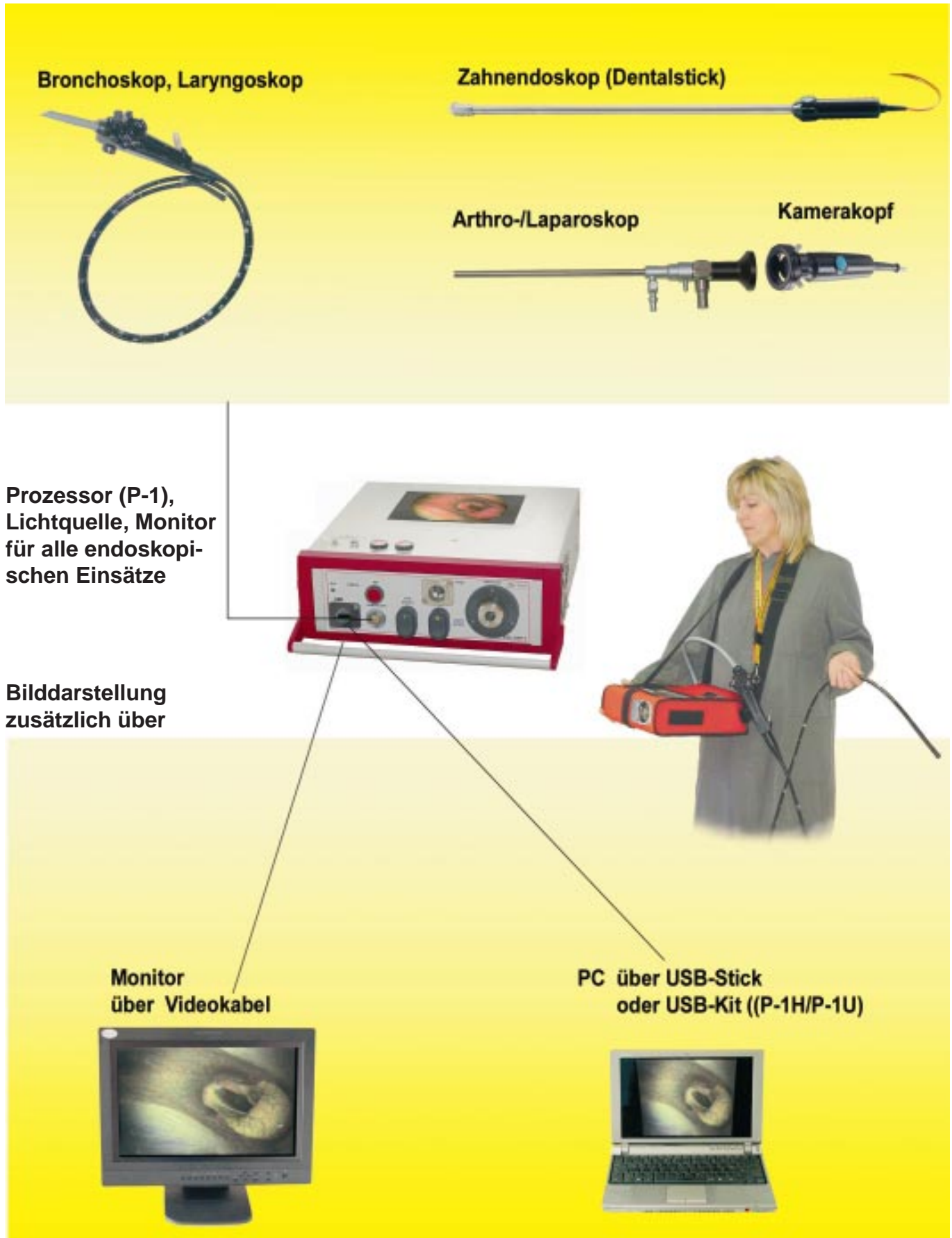

Zubehör:

Katheter, Injektionsnadel



- F20-220** Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz, D: 22 mm, NL: 235 cm
F20-219 Ersatzbronchialkatheter o. Luer-Lock, 10 m
LLW-1220 Luer-Lock-Schlauchanschluß, wbl., 2 mm



- F231-220** Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch
 D: 2,3 mm, NL: 240 cm, Nadel: 0,6x10 mm

Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie


(Fragen Sie uns nach gebrauchten, leistungsstarken HF-Geräten)



- HF22-2301** Saug-Koagulations-Elektrode, flexibel, monopolar, mit Luer-Lock Anschluß, D: 2,2 mm, NL: 230 cm



- SL23-2310** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, NL: 230mm, mit asymmetrischer Schlinge (Breite: 25 mm), passend zum Handgriff HS11-1200

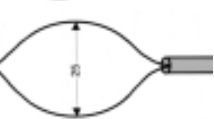


- SL23-2312** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, NL: 230 cm, mit symmetrischer Schlinge (Breite: 35 mm), passend zum Handgriff HS11-1200




- HS11-1200** Handgriff für Polyp-Ektomieschlingen, Standardgrößen

- HF-301-ER** Standard HF-Verbindungskabel, monopolar, 3 m

Biopsie-, Faßzange, Greifer u.a.

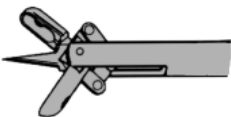

Bestell-Nr.		Ø (mm)	Länge (cm)
B22-22011	Biopsiezange	2,2	230
B23-3601	(mit Dorn)	2,3	360

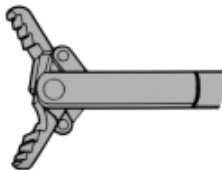

F22-22041	Faßzange	2,2	230
F23-3604		2,3	360



F22-22040	Dreifußgreifer	2,2	230
------------------	-----------------------	-----	-----



F23-22042	FK-Faßzange	2,3	220
------------------	--------------------	-----	-----



FK23-2035	Körbchen	2,3/4,5x6cm	230
------------------	-----------------	-------------	-----